


Électrode pH intelligente pour edge®

Pour la viande

FC2320

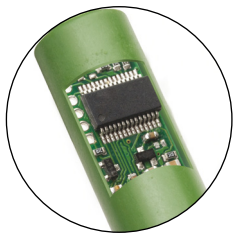

Les électrodes conçues pour edge® sont aussi innovantes que l'instrument lui-même. Munies d'une puce électronique, elles ont en mémoire type de la sonde, données d'étalonnage et numéro de série. Ces informations sont automatiquement transférées sur l'instrument dès leur connexion.

Elles apportent les avantages de confort et de sécurité suivants :

- le passage d'une électrode à une autre s'effectue sans

réétalonnage

- l'instrument est capable de déterminer la nécessité d'un réétalonnage en fonction d'un intervalle de temps donné
- l'instrument avertit l'utilisateur lorsque l'électrode est en mauvaise condition et ne permet plus des mesures avec la précision attendue.

Les données mémorisées dans les électrodes pH sont :


- les valeurs tampons étalonnées
- la date
- l'heure
- le point 0 et les caractéristiques de la pente.

Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipées d'un connecteur type jack 3,5 mm permettant une connexion rapide et sûre.

Référence

FC2320

Description	Électrode pH intelligente
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte / Continu
Électrolyte	Viscolène
Pression max.	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH
Embout / Forme	Conique (6 x 10 mm)
Capteur de température	Oui
Entrée différentielle	Non
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	PVDF
Câble	1 m
Connecteur	Mini-jack 3,5 mm
Usage recommandé	Mesures dans la viande
Température d'utilisation recommandée	0 à 60 °C
Instruments compatibles	HI2020-02, HI2030-02, HI2040-02, HI2002-02

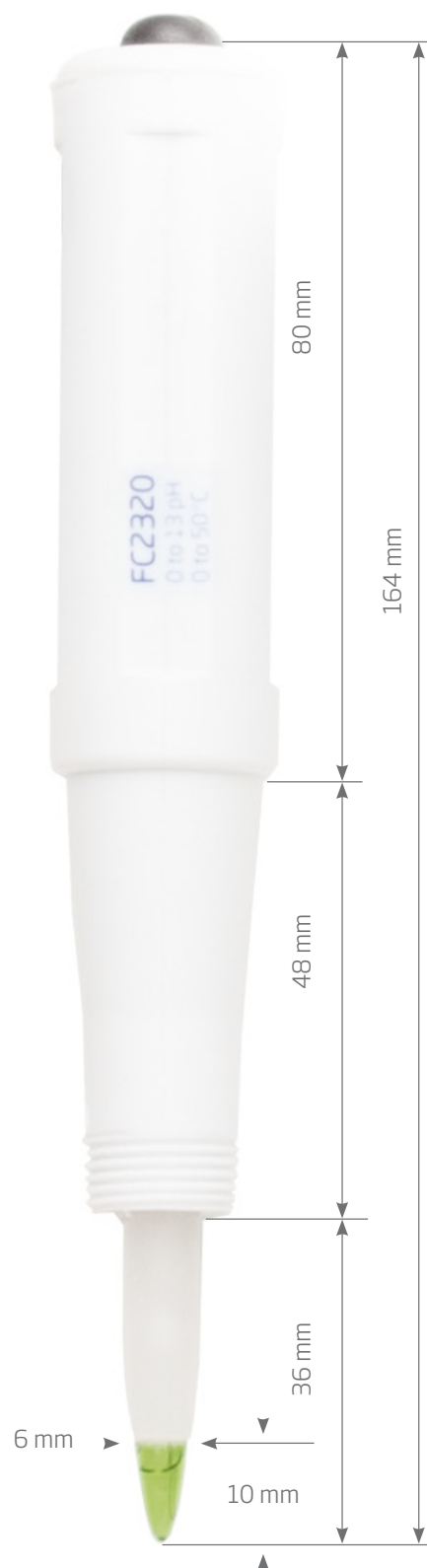

FC098 et FC099
Lames en acier inox
pour électrodes pH
spéciales viandes (en
option)