



Humeau
Expert du laboratoire

Prélèvements microbiologiques



 **SodiBox**

Commandez sur
www.humeau.com



Chiffonnette de prélèvement en sachet à lien de refermeture

Pour contrôles de surface
Recherche pour analyse Salmonelle et Listeria



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour les prélèvements de surface

• Stérilité

Stérilisation par rayons gamma à 20 kilograys minimum. Stérilité de chaque lot de produit vérifiée par un laboratoire extérieur certifié COFRAC.

• Qualité de la chiffonnette

Haute qualité du non-tissé, dont l'absence de substance inhibitrice est garantie. Arrivée au laboratoire, permet un relargage optimal des germes en phase de pré-enrichissement.

• Diluants

La fabrication de nos diluants respecte la norme ISO 11133. Différents diluants proposés systématiquement avec un agent neutralisant adapté à chaque type de désinfectant.

• Qualité du sachet

Nos sachets de prélèvement sont parfaitement adaptés pour le malaxage en broyeur et disposent d'une ouverture et refermeture facile garantissant l'intégrité du prélèvement durant toute la durée du transport.

Garantie du produit

- Validité garantie jusqu'à 1 an pour les produits humides, 2 ans pour les produits secs
- Les produits sont livrés avec le certificat de ionisation
- Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque kit, carton et certificat d'analyse

Compositions d'un kit :

- **Le support de prélèvement :** une chiffonnette indéchirable qui ne goutte pas et ne s'effiloche pas.
- **Le diluant et l'agent neutralisant** sont formulés suivant les standards.
- **Un sachet de prélèvement** avec lien de fermeture intégré, proposé avec une zone d'inscription pour l'identification du prélèvement.
- **Gants stériles** (en option) ambidextres sans latex.

Options disponibles :

- **Couleur chiffonnette**
Bleue ou blanche



- **Structure**
Alvéolée ou pleine



- **Dimensions** en cm
Petites 34x16 et 32x17
Grandes 34x30 et 34x37

• Diluant

- Eau distillée à 10% de neutralisant (ED + Neutralisant)
- Eau peptonée tamponnée (EPT)
- Eau peptonée à 10% de neutralisant (EPT + Neutralisant)
- Sans diluant/sec

• Paire de gants

Sachet à lien de refermeture





Réf. : 253852 - 253821 - 253849
253855 - 253820



Réf. : 253819
Réf. : 253828



Réf. : 253827
Réf. : 253822

Après désinfection

Référence	Chiffonnette				Volume (en ml)	Sachet de prélèvement	Paire de gant	Pack
	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant				
253852	Bleue	Alvéolée	34x16cm	ED + Neutralisant	10	Bleu	Non	Pack de 25 pièces
253821	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT + Neutralisant	10	Bleu	Non	Pack de 25 pièces
253839	Blanche	Pleine	34x30cm	EPT + Neutralisant	12	Transparent et écriture verte	Non	Carton de 300 pièces
253828	Blanche	Alvéolée	34x37cm	EPT + Neutralisant	25	Transparent et écriture verte	Non	Carton de 175 pièces
253827	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT + Neutralisant	10	Bleu	Oui	Carton de 130 pièces
253848	Blanche	Pleine	34x30cm	EPT + Neutralisant	12	Bleu	Oui	Carton de 120 pièces
253819	Blanche	Alvéolée	34x37cm	EPT + Neutralisant	25	Transparent et écriture verte	Oui	Carton de 100 pièces

En cours de production

Référence	Chiffonnette				Volume (en ml)	Sachet de prélèvement	Paire de gant	Pack
	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant				
253849	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT	10	Bleu	Non	Pack de 25 pièces
253857	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT	10	Transparent et écriture noire	Non	Carton de 300 pièces
253822	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT	10	Bleu	Oui	Carton de 130 pièces

Environnement poudres de lait / denrée alimentaire

Référence	Chiffonnette				Volume (en ml)	Sachet de prélèvement	Paire de gant	Pack
	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant				
253855	Bleue	Alvéolée	34x16cm	Absence (sec)	0	Bleu	Non	Carton de 300 pièces
253844	Bleue	Pleine	32x17cm	Absence (sec)	0	Bleu	Non	Carton de 150 pièces
253820	Bleue	Alvéolée	34x37cm	Absence (sec)	0	Bleu	Non	Carton de 150 pièces



Chiffonnette de prélèvement en sachet à prédécoupe laser

Pour contrôles de surface
Recherche pour analyse Salmonelle et Listeria



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour
les prélèvements de surface

• Stérilité

Stérilisation par rayons gamma à 20 kilograys minimum. Stérilité de chaque lot de produit vérifiée par un laboratoire extérieur certifié COFRAC.

• Qualité de la chiffonnette

Haute qualité du tissu et non-tissé, dont l'absence de substance inhibitrice est garantie. Arrivée au laboratoire, permet un relargage optimal des germes en phase de pré-enrichissement.

• Diluants

La fabrication de nos diluants respecte la norme ISO 11133. Différents diluants proposés systématiquement avec un agent neutralisant adapté à chaque type de désinfectant.

• Qualité du sachet

Nos sachets de prélèvement sont parfaitement adaptés pour le malaxage en broyeur et disposent d'une ouverture et refermeture facile garantissant l'intégrité du prélèvement durant toute la durée du transport.

Garantie du produit


- Validité garantie jusqu'à 1 an pour les produits humides, 2 ans pour les produits secs
- Les produits sont livrés avec le certificat de ionisation
- Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque kit, carton et certificat d'analyse

Compositions d'un kit :

- **Le support de prélèvement :** une chiffonnette ou compresse indéchirable qui ne goutte pas et ne s'effiloche pas.
- **Le diluant et l'agent neutralisant** sont formulés suivant les standards en vigueur ; volume constant et calibré pour l'ensemble des kits.
- **Un sachet de prélèvement avec ouverture facile par prédécoupe laser** proposé avec une zone d'inscription pour l'identification du prélèvement.
- **Gants stériles** (en option) ambidextres sans latex.

Utilisation possible du sachet comme un gant, par retournement sur la main

Options disponibles :

- **Étiquette de refermeture** intégrée
- **Chiffonnette bleue**
Structure Alvéolée ou pleine

Dimensions en cm
Petites 16x20 et 32x17 et 34x16
Grandes 34x30
- **Compresse**
Dimensions en cm
20x20 et 40x40
- **Diluant**
 - Eau distillée à 10% de neutralisant (ED + Neutralisant)
 - Eau peptonée à 10% de neutralisant (EPT + Neutralisant)
 - Eau peptonée tamponnée (EPT)
 - Tryptone + Neutralisant (TN)
 - Sans diluant/sec
- **Paire de gants**

Option étiquette de refermeture





Réf. : 253874
Réf. : 253875



Réf. : 253866 Réf. : 253868
Réf. : 253867 Réf. : 253870
Réf. : 253871



Réf. : 253865



Réf. : 271738

Après désinfection

Référence	Support	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant	Volume (en ml)	Étiquette de refermeture	Pack
253874	Compreste	Blanche	Tissé	40x40cm	ED + Neutralisant	10	Non	Pack de 20 pièces
253868	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	34x16cm	ED + Neutralisant	10	Non	Pack de 20 pièces
253880	Chiffonnette	Bleue	Pleine	34x30cm	ED + Neutralisant	12	Non	Carton de 140 pièces
253866	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT + Neutralisant	10	Non	Pack de 20 pièces
271738	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	16x20cm	EPT + Neutralisant	8	Oui	Pack de 20 pièces
253870	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	34x16cm	TN + Neutralisant	25	Non	Carton de 160 pièces
253871	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	34x37cm	TN + Neutralisant	25	Non	Carton de 140 pièces

En cours de production

Référence	Support	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant	Volume (en ml)	Étiquette de refermeture	Pack
253875	Compreste	Blanche	Non-tissée	20x20cm	EPT	8	Non	Carton de 200 pièces
253867	Chiffonnette	Bleue	Alvéolée	34x16cm	EPT	10	Non	Pack de 20 pièces

Environnement poudres de lait / Contrôle de denrée alimentaire

Référence	Support	Couleur	Structure	Dimensions	Diluant	Volume (en ml)	Étiquette de refermeture	Pack
253865	Chiffonnette	Bleue	Pleine	32x17cm	Absence (sec)	0	Non	Carton de 150 pièces



Éponge de prélèvement avec manche de préhension

Pour contrôles de surface et carcasses en abattoirs
Recherche pour analyse Salmonelle et Listeria



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour
les prélèvements de surface

• Stérilité

Stérilisation par rayons gamma à 20 kilograys minimum. Stérilité de chaque lot de produit vérifiée par un laboratoire extérieur certifié COFRAC.

• Qualité de l'éponge

Éponge de qualité premium, dont l'absence de substance inhibitrice est garantie. Arrivée au laboratoire, permet un relargage optimal des germes en phase de pré-enrichissement.

• Diluants

La fabrication de nos diluants respecte la norme ISO 11133. Différents diluants proposés systématiquement avec un agent neutralisant adapté à chaque type de désinfectant.

• Qualité du sachet

Nos sachets de prélèvement sont parfaitement adaptés pour le malaxage en broyeur et disposent d'une ouverture et refermeture facile garantissant l'intégrité du prélèvement durant toute la durée du transport.

Garantie du produit

- Validité garantie jusqu'à 1 an pour les produits humides
- Les produits sont livrés avec le certificat de ionisation
- Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque kit, carton et certificat d'analyse

Compositions d'un kit :

- **Le support de prélèvement avec manche de préhension :**
une éponge en cellulose 8x4 cm, épaisseur 1,6 cm, manche en plastique bleu souple
- **Le diluant et l'agent neutralisant** formulés suivant les standards en vigueur ; volume constant et calibré pour l'ensemble des kits.
- **Un sachet de prélèvement** à prédécoupe laser avec étiquette de refermeture intégrée, proposé avec une zone d'inscription pour l'identification du prélèvement, et dont les soudures sont testées et validées pour une utilisation en broyeur.

Options disponibles :

- **Diluant**
- Eau peptonée tamponnée (EPT)
- Eau peptonée à 10% de neutralisant (EP + Neutralisant)
- **Gabarit stérile 100 cm²**

Étiquette de refermeture



Manche de préhension avec pince pour libérer l'éponge





Réf. : 273763 - Réf. : 273764

Après désinfection

Référence	Diluant	Volume (en ml)	Paire de gant	Pack
273764	EP + Neutralisant	10	Non	Carton de 100 pièces

En cours de production ou contrôle de carcasses

Référence	Diluant	Volume (en ml)	Paire de gant	Pack
273763	EPT	10	Non	Carton de 100 pièces




Réf. : 253861



Réf. : 253862

Gabarit stérile

Référence	Dimension (en cm)	Matière	Pack
253862	10 x 10	PVC, contact alimentaire	Carton de 50 pièces
253861	10 x 10	PVC, contact alimentaire	Carton de 260 pièces

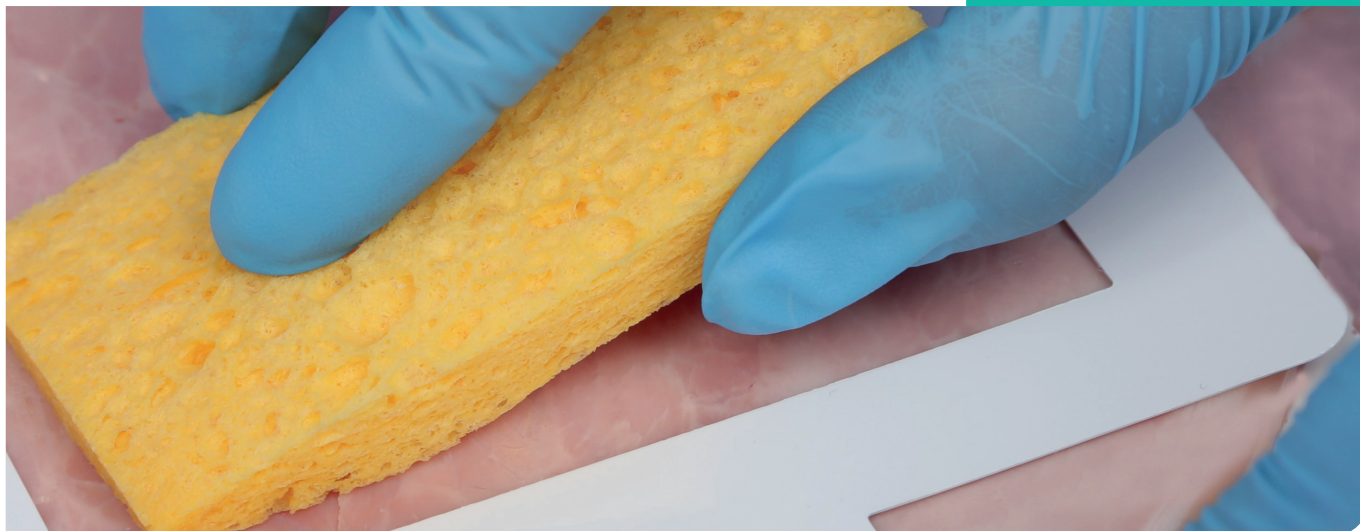

Éponge de prélèvement

Pour contrôles de surface et carcasses en abattoirs
Recherche pour analyse Salmonelle et Listeria



Norme ISO 18593
Norme ISO 17604

• Stérilité

Stérilisation par rayons gamma par ionisation à 20 kilograys minimum. Stérilité de chaque lot de produit vérifiée par un laboratoire extérieur certifié COFRAC.

• Qualité de l'éponge

Éponge de qualité premium, dont l'absence de substance inhibitrice est garantie. Arrivée au laboratoire, permet un relargage optimal des germes en phase de pré-enrichissement.

• Diluants

La fabrication de nos diluants respectent la norme ISO 11133 et les instructions techniques de la DGAL.

• Qualité du sachet

Nos sachets de prélèvement sont parfaitement adaptés pour le malaxage en broyeur et disposent d'une ouverture et refermeture facile garantissant l'intégrité du prélèvement durant toute la durée du transport.

Garantie du produit

- Validité du produit garantie jusqu'à 1 an après stérilisation du kit jusqu'à 1 an après stérilisation pour les éponges, et 2 ans pour les gabarits
- Les produits sont livrés avec le certificat de ionisation
- Traçabilité par numéro de lot inscrit sur chaque kit, carton et certificat d'analyse

Composition d'un kit :

- **Le support de prélèvement :**
une éponge en cellulose
8 x 4 cm, épaisseur 1,6 cm.
- **Le diluant et l'agent neutralisant**
formulés suivant les standards en vigueur ; volume constant et calibré pour l'ensemble des kits.
- **Un sachet de prélèvement**
avec système de refermeture intégré, proposé avec une zone d'inscription pour l'identification du prélèvement, et dont les soudures sont testées et validées pour une utilisation en broyeur.
- **Gants stériles** (en option)
ambidextres et sans latex.

Options disponibles :

- **Diluant**
- Eau peptonée tamponnée (EPT)
- Eau peptonée à 10% deneutralisant (EP + Neutralisant)
- **Sachet de prélèvement :**
① Sachet à lien de refermeture
② Sachet à prédécoupe laser + étiquette de refermeture
- **Paire de gants**
- **Gabarit stérile 100 cm²**





Réf. : 253878 - 273761



Réf. : 253879 - 273762



Réf. : 253860



Réf. : 253859

Après désinfection

Référence	Diluant	Volume (en ml)	Sachet de prélèvement	Paire de gants	Pack
253878	Eau peptonée à 10% de neutralisant	10	A prédécoupe laser et étiquette de refermeture	Non	Carton de 100 pièces
253879	Eau peptonée à 10% de neutralisant	10	A prédécoupe laser et étiquette de refermeture	Oui	Carton de 100 pièces

En cours de production ou contrôle de carcasses

Référence	Diluant	Volume (en ml)	Sachet de prélèvement	Paire de gants	Pack
273761	Eau peptonée tamponnée	10	A prédécoupe laser et étiquette de refermeture	Non	Carton de 100 pièces
273762	Eau peptonée tamponnée	10	A prédécoupe laser et étiquette de refermeture	Oui	Carton de 100 pièces
253860	Tryptone sel	10	A lien de refermeture	Non	Carton de 50 pièces
253859	Tryptone sel	10	A lien de refermeture	Oui	Carton de 50 pièces



Réf. : 253861



Réf. : 253862

Gabarit stérile

Référence	Dimensions (en cm)	Matière	Pack
253862	10 x 10	PVC, contact alimentaire	Carton de 50 pièces
253861	10 x 10	PVC, contact alimentaire	Carton de 260 pièces

Les valeurs

La société **SodiBox** est une entreprise familiale qui rayonne en France et à l'étranger grâce à son équipe, constituée d'une trentaine de personnes, pleinement mobilisée chaque jour pour concevoir et apporter à ses clients les meilleurs produits et service possibles.

Reconnue pour sa **rigueur**, sa **réactivité**, sa **capacité à innover** et à créer des **produits de haute qualité**.



SodiBox est certifié AFAQ depuis 2003 pour l'ensemble de ses 11 processus, de la conception à l'expédition des produits.



Qualité

• Contrôles qualité internes

- Autocontrôles enregistrés en cours de production
- Conservation des échantillons témoins de production

• Contrôles par laboratoire extérieur

- Diluants contrôlés selon la norme XP CEN ISO/TS 11133
- Stérilité et fertilité de chaque lot de produits finis

• Traçabilité

- Numéro de lot sur chaque dispositif avec : référence, désignation, code diluant et date de validité
- Audit annuel de la traçabilité

• Processus d'amélioration continue

- Certification ISO 9001 pour tous les processus, de la conception à l'expédition

• Stérilisation

- Ionisation à 20 kilograys minimum
- Processus externe sous contrôle de notre programme qualité
- Étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton



Avant



Après

• Validité

- Dispositifs humides : 1 an
- Dispositifs secs : 2 ans

Sur-mesure Innovation

Si vous avez des besoins spécifiques,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous accompagner
dans votre projet.

En cas de besoin, vous pouvez compter sur **Humeau**,
disponible pour répondre à toutes vos questions et vous assister.

Innovation

Produits sur mesure

À la pointe de l'innovation, **SodiBox** mène
un programme de développement avec
un réseau de professionnels en biologie
médicale, vétérinaire et hygiène alimentaire.

Leur mission : toujours vous proposer
les produits les plus performants.

Distribué par



Humeau
Expert du laboratoire



Nos spécialistes produits **Humeau**
sont à votre disposition au

02 40 93 53 53

ou par mail :
commercial@humeau.com



Humeau

Expert du laboratoire

11 rue des Imprimeurs - Z.A. des Hauts-de-Couëron

44220 Couëron - France

Tél. : +33 (0)2 40 93 53 53 - info@humeau.com

Commandez sur
www.humeau.com



SodiBox

www.sodibox.com